

**Удовольствие
в заботе!**



**Массажер для лица
КТ-2964**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство массажера	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Портативный массажер КТ-2964 отличается высокой эффективностью, компактностью, отсутствием проводов во время использования, универсальностью применения и простота.

Основным элементом массажера является натуральный красный камень бьянши, который содержит более 30 видов микроэлементов, полезных для кожи. Также он хорошо проводит тепло, что позволяет улучшать микроциркуляцию крови и метаболизм кожи. Красный камень бьянши часто используют в традиционной китайской медицине. Камень в основном состоит из известняка (кальцита), окиси кремния и окиси натрия. Микрористаллическая структура камня позволяет использовать камень для массажа лица, обеспечивая мягкое воздействие. Камень считается редким и добывается в Китае в провинции Шаньдун.

Использование камней для массажа — одна из древних практик в китайской традиционной медицине, которая считается предшественницей акупунктуры. Камни использовались для лечения болей в пояснице, шее, а также улучшения кровообращения.

Далеко не всегда есть возможность посетить полноценный сеанс массажа с использованием камней. В лечебных целях такой массаж должен выполнять только профессиональный массажист или врач. Однако с использованием КТ-2964 вы сможете в домашних условиях выполнять расслабляющий массаж по древней китайской традиции. Массажер не является медицинским прибором и должен использоваться только в профилактических и косметологических целях.

Массажер используется для улучшения состояния кожи. Он улучшает циркуляцию крови и лимфы, а также ускоряет обмен веществ в верхних слоях кожи, благодаря чему выравнивается ее цвет. Массажер улучшает тонус мышц лица, делает его форму более выразительной, сокращает морщины и предотвращает появление новых. Также он помогает избавиться от отечности по утрам и расслабить мышцы лица и шеи в конце дня.

Также вы можете использовать устройство для массажа спины, рук, ног и зоны живота.

Устройство оснащено функцией нагрева. Массаж теплым камнем улучшает кровообращение, так как под действием тепла кровеносные сосуды расширяются. Тепло также содействует снятию напряжения в мышцах.


Разнонаправленная высокочастотная вибрация прибора и два светодиода, расположенные рядом с камнем и излучающие свет в красном диапазоне электромагнитного спектра, усиливают расслабляющий, косметический и омолаживающий эффект от массажа. Благодаря ультразвуковым импульсам значительно увеличивается количество трансдермального углекислого газа (углекислого газа, выделяющегося через кожу), что позволяет поддерживать правильный трансдермальный газообмен.

Особая форма камня делает удобным массаж разных зон лица и тела.
Массажером удобно пользоваться: он компактный и работает от аккумулятора. В комплекте с прибором идет шнур USB Type-C.

Комплектация

1. Массажер с заглушкой разъема для зарядки — 1 шт.
 2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- * опционально

Устройство массажера

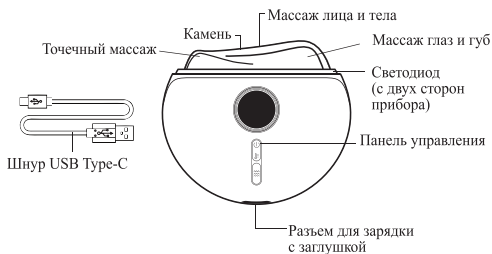


Камень имеет особую форму, чтобы обеспечить удобство и эффективность массажа разных участков лица и тела. Средней частью камня обрабатывайте крупные области лица (лоб, щеки, линия челюсти), шею и тело, а боковыми сторонами более мелкие области (зону вокруг глаз, около крыльев носа и вокруг рта).

Разъем для зарядки закрывается специальной заглушкой, чтобы предотвратить попадание влаги и пыли в разъем для зарядки.

Устройство комплектуется шнуром USB Type-C для зарядки.

Панель управления

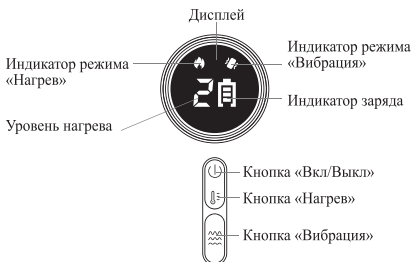

На дисплее отображается уровень нагрева от 1 до 3, уровень заряда, а также индикаторы режимов «Нагрев» и «Вибрация».

Нажатие и удерживание кнопки «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд включает и выключает массажер и светодиоды.

Нажатие на кнопку «Нагрев» циклически переключает уровень нагрева от 0 до 3, где 0 — нагрев выключен, 3 — самый сильный нагрев. Диапазон температур: 45 °C — 1 уровень, 50 °C — 2 уровень, 55 °C — 3 уровень. На дисплее загорается индикатор режима «Нагрев» и отображается уровень нагрева.

Нажатие на кнопку «Вибрация» включает и выключает режим «Вибрация». На дисплее загорается индикатор режима «Вибрация».

Долгое нажатие на кнопку «Вибрация» включает и выключает светодиоды.

Индикация заряда отображается следующим образом:

- индикатор заряда мигает, когда массажер заряжается;
- индикатор заряда горит непрерывно, когда массажер полностью заряжен;
- граница индикатора заряда мигает, когда массажер разряжен.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер из коробки и удалите весь упаковочный материал.

Протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью корпус массажера. Тщательно продезинфицируйте рабочую поверхность массажера: ее можно протереть ватным диском, смоченным в 75% растворе спирта или хлоргексидине.

Зарядка аккумулятора

Перед первым включением зарядите массажер.

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, если он рассчитан на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: =5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Откройте заглушку и вставьте шнур USB Type-C в разъем для зарядки на массажере, а затем подключите шнур к источнику питания.

Индикация заряда отображается следующим образом:

- индикатор заряда мигает, когда массажер заряжается;
- индикатор заряда горит непрерывно, когда массажер полностью заряжен;
- граница индикатора заряда мигает, когда массажер разряжен.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 2,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки прибор включить нельзя. Чтобы включить массажер, сначала отключите его от источника питания.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от массажера и закройте разъем для зарядки заглушкой.

От одной зарядки прибор работает 2 часа.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите массажер, затем заряжайте примерно 1–1,5 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
2. Очистите лицо от косметики и прочих загрязнений привычным средством для умывания. Просушите кожу лица полотенцем или бумажными салфетками.

Примечание. Вы также можете делать массаж других частей тела: спины, плеч, рук, зоны живота.

Внимание! Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью: ванне, бане и сауне. Следите, чтобы кожа лица и тела была сухой, берите массажер только сухими руками.

3. Нанесите на лицо и шею косметическое масло, сыворотку для лица или увлажняющий крем. Использование массажера вместе с некоторыми косметическими средствами может увеличить их эффективность (например, увлажняющая маска лучше впитается). Для массажа тела смажьте массажным маслом участок тела, где будете делать массаж. Будьте внимательны при выборе средств, чтобы избежать аллергических реакций.

4. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Загорится дисплей и светодиоды.

Примечание. По умолчанию установлен уровень нагрева 1 (45 °С). Индикатор режима «Нагрев» будет гореть.

5. Нажимайте на кнопку «Нагрев», чтобы выбрать нужный уровень. Чтобы отключить режим «Нагрев», нажимайте на кнопку, пока на дисплее не отобразится «0». Прибору нужно время, чтобы нагреться, поэтому перед началом массажа немного подождите, пока камень нагреется.

Внимание! При первом использовании начните с 1 уровня нагрева и проследите за реакцией кожи. Затем вы можете попробовать увеличить температуру нагрева, но будьте внимательны, чтобы не навредить коже высокой температурой, так как чувствительность кожи индивидуальна. Не держите массажер долго на одном месте во избежание ожогов (даже при 1 уровне нагрева).

6. Нажмите на кнопку «Вибрация», чтобы включить режим «Вибрация». При этом индикатор режима «Вибрация» загорится. Чтобы отключить режим, снова нажмите на кнопку.

Примечание. Долгое нажатие на кнопку «Вибрация» отключает и включает работу светодиодов.

7. Проводите массаж, двигаясь вдоль массажных линий лица и тела. Обрабатывайте средней частью камня крупные области лица (лоб, щеки, линия челюсти), шею и тело, а боковыми сторонами более мелкие области (зону вокруг глаз, около крыльев носа и вокруг рта). Ниже представлены рисунки с изображением массажных линий.





8. Время массажа 3–10 минут. Чтобы отключить массажер, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл».
9. Протирайте массажер влажной, а затем сухой мягкой тканью после каждого использования. Не допускайте попадания воды в корпус устройства и на панель управления.

Внимание! Не подносите прибор к сердцу, позвоночнику, слизистым оболочкам и точкам пульсации. Не давите слишком сильно на кожу во время массажа. При дискомфорте во время массажа прекратите процедуру и обратитесь к врачу. Не используйте массажер после проведения химического пилинга лица.

Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу. Если у вас хрупкие сосуды, будьте осторожны при пользовании массажером и перед полноценным массажем проследите за реакцией кожи и сосудов.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических и косметологических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
 - беременность;
 - онкология;
 - инфекционные заболевания кожи;

Kitfort

- кожа, склонная к аллергическим реакциям;
- нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
- варикозное расширение вен, тромбофлебит;
- нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
- остеопороз;
- наличие электронных устройств, при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
- недавняя операция или ввод инъекций;
- почечная недостаточность;
- повышенная температура, грипп, ОРВИ;
- сахарный диабет;
- наличие многочисленных родинок;
- менструация;
- наличие каких-либо заболеваний в острой форме;
- нечувствительность к теплу;
- при переломах и растяжениях связок;
- гипогликемия;
- гипертония;
- слабость, нервозность;
- переутомление.

Советы

После включения режима «Нагрев» рекомендуется подождать некоторое время, пока камень нагреется, а затем приступать к массажу.

Не подносите прибор к сердцу, позвоночнику, слизистым оболочкам и точкам пульсации.

Не давите слишком сильно на кожу во время массажа. При дискомфорте во время массажа прекратите процедуру и обратитесь к врачу.

Не используйте массажер после проведения химического пилинга лица.

Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15—20 минут, обратитесь к врачу.

Если у вас хрупкие сосуды, будьте осторожны при пользовании массажером и перед полноценным массажем проследите за реакцией кожи и сосудов.

Массаж лучше проводить за 2 часа до или после еды.

Массаж одной части тела может включать в себя до 20 движений вверх-вниз по массажным линиям или по кругу.

Регулируйте силу давления в соответствии с возрастом, телосложением и частями тела. Регулируйте температуру по своим ощущениям. Даже низкая температура массажера, длительно воздействуя на одну часть тела, может вызывать ожог. Будьте осторожны!

Время проведения массажа зависит от ощущений человека и составляет в среднем от 3 до 10 минут.

После массажа находитесь в тепле, избегая переохлаждения и ветра. Отдохните в течение 20 минут.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться гематомы и болевые ощущения в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

Вы можете использовать массажер совместно с тканевыми масками. Для этого предварительно нанесите тканевую маску на лицо, затем проведите процедуру массажа с помощью массажера, как описано в разделе «Использование». Использование массажера поверх тканевой маски позволяет активным веществам из сыворотки, которой пропитана маска, глубже проникнуть в кожу. Это приводит к более заметному эффекту после процедуры.

Массажер может быть использован для массажа гуаша. Для его выполнения необходимо изучить технику массажа под руководством специалиста и проконсультироваться с врачом.

От одной зарядки прибор работает 2 часа.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус массажера влажной, а затем сухой мягкой тканью. Протирайте рабочую поверхность массажера сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью после каждого использования. Очищайте массажер сразу, чтобы остатки косметических средств не застывали на камне. Не допускайте попадания воды и других жидкостей в корпус массажера, на панель управления и шнур USB Type-C.

Для дезинфекции можно протирать рабочую поверхность массажера раствором 75% спирта или хлоргексидина.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать на хранение, очистите массажер, как указано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор массажера литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1–1,5 часа.

При длительном хранении заряжайте массажер наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните массажер при температуре от 0 до 40 °С.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Разрядился аккумулятор	Зарядите устройство
Вы не удерживали кнопку «Вкл/Выкл»	Для включения устройства необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд

Устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Вы не до конца подключили шнур USB Type-C в разъем	Вставьте шнур USB Type-C до конца
Слабый ток источника питания	Используйте источник питания с параметрами: $\sim 5\text{ В}, 1\text{ А}$
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\sim 5\text{ В}, 1\text{ А}$
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1 А*ч (3,7 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Длина шнура USB Type-C: 0,7 м
6. Рабочая поверхность: красный камень бьянши
7. Количество уровней нагрева: 3
8. Рабочая температура: 45–55 °С
9. Время зарядки: 2 ч 30 мин
10. Время работы: 2 ч
11. Размер устройства: 90 × 78 × 30 мм
12. Размер упаковки: 124 × 134 × 47 мм
13. Вес нетто: 0,08 кг
14. Вес брутто: 0,25 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуанчжоу Нью Дизайн Байотекнолэджи Ко., Лтд. Рум 101, Билдинг 6, №265 Чиган Вест Роуд, Хайчжу Дистрикт, Гуанчжоу, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо разделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажера, его аксессуаров или составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей на массажер или шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Появление небольших трещин на камне не является гарантийным случаем, так как камень имеет природное происхождение и появление небольших трещин — нормальное явление.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

**Kitfort**

2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, в область разъема для зарядки и органы управления.
14. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным кабелем или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
16. Не подносите прибор к сердцу, позвоночнику, слизистым оболочкам и точкам пульсации.
17. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87